

醫護人員注意事項 警語與預防 可能導致不正確血糖判讀值

親愛的醫師/護理師/藥師/檢驗師/行政人員：

百特醫療產品股份有限公司特別跟您傳遞一個重要的安全訊息，關於使用愛多尼爾[®]腹膜透析液EXTRANEAL (icodextrin)的病人當需要執行血糖監測時的注意事項。

當腹膜透析病人使用愛多尼爾[®]腹膜透析液 EXTRANEAL(icodextrin)時，如使用某些特定的血糖機或血糖試紙，可能會有血糖值被誤判的結果。

只能使用具有葡萄糖專一性的血糖機或試紙。這些是臨床實驗室裡普遍使用的方式。請與您血糖機或試紙製造商聯繫是否是使用此種測試方式。更進一步訊息，包括相容的血糖機目錄，請參閱

www.glucosafety.com

具有“葡萄糖專一性”的血糖機或試紙是不會受到麥芽糖或是其他醣類影響到血糖值。因為愛多尼爾[®]腹膜透析液EXTRANEAL (icodextrin)會升高血糖中的麥芽糖濃度，所以只能使用具有葡萄糖專一性的血糖機或試紙。


不可使用利用葡萄糖去氫酶GDH-PQQ(glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone)或葡萄糖染色劑氧化還原酶(glucose-dye-oxidoreductase)的方式測量血糖的血糖機，或血糖試紙。除此之外，部分但非全部以glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) 測試方式的血糖機，或血糖試紙是不可使用的。當愛多尼爾[®]EXTRANEAL (icodextrin)腹膜透析液的病人在使用以上方式測量血糖時，將會造成錯誤的血糖判讀。因為麥芽糖會干擾這些血糖機或血糖試紙。可能掩蓋了愛多尼爾[®]EXTRANEAL(icodextrin)腹膜透析液的病人低血糖，而誤判為正常血糖值，如此將導致病人或醫護人員沒有採取適當的措施使血糖值回復正常範圍。而若誤判病人為高血糖，則可能讓病人接受過多的胰島素治療。這兩種情況都有可能威脅到病人安全，包括喪失意識，昏迷，神經損傷或死亡。

照顧使用愛多尼爾[®]腹膜透析液EXTRANEAL(icodextrin)的病人，其他注意事項包括：

- 1.當中斷使用愛多尼爾[®]腹膜透析液EXTRANEAL(icodextrin)時，干擾血糖監測的風險不會立即消失。停用EXTRANEAL二週內仍可能會發生偽高血糖的情形。
- 2.請在使用血糖機或試紙之前，詳閱內附仿單說明來確認測試方式。如有任何疑慮，請立即與您血糖機或試紙製造商聯繫使用測試方式。
- 3.如果您的醫院是使用電子病歷，上述干擾血糖監測的訊息，應採取合適並立即的提醒方式來告知使用者。

若需更進一步的訊息，請參考愛多尼爾[®]腹膜透析液EXTRANEAL (icodextrin)仿單，或參閱 www.glucosafety.com 上述訊息對您提供腹膜透析病患照護將有所助益。如果您對愛多尼爾[®]腹膜透析液EXTRANEAL(icodextrin)有其他的問題，請來電百特腹膜透析諮詢專線0800-009-989聯繫 (週一至週五 AM9:00 ~ PM6:00)

亞太區 醫療部總裁

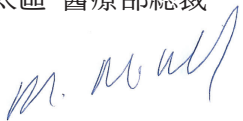

敬上

百特醫療產品股份有限公司

Baxter

BAXTER和EXTRANEAL為百特醫療產品股份有限公司之註冊商標 2014/11/11